




HEC-1-B

产品描述

HEC-1-B (中文名称: 人子宫内膜癌细胞), 是 H·Kuramoto 于 1968 年分离的 HEC-1-A 细胞亚株。不同于 HEC-A-1 的是: HEC-1-B 细胞在培养第 135 天到 190 天之间表现出稳定的生长周期, 且重现扁平, 与亲本细胞系相比更具铺路石样。此外, HEC-1-B 细胞的主要染色体组是亲本细胞的两倍。

正常的细胞形态为上皮样, 贴壁生长。种属: 人; 组织来源: 子宫内膜腺癌; 细胞类型: 肿瘤细胞; 肿瘤类型: 子宫内膜腺癌。

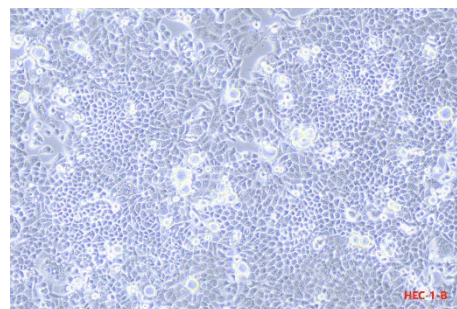

细胞形态图 100×

订购信息

产品名称	货号	规格
HEC-1-B	AX01L941	T25/1 mL

运输方式

常温/干冰运输。

使用方法

培养方法

培养基	MEM(含 NEAA) + Fetal Bovine Serum(GIBCO: 10099141)或和元李记特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055) 10% + P/S (货号: AC03L332) 1%
培养条件	37°C 5% CO ₂
消化条件	0.25% (w/v) Trypsin-0.53 mM EDTA 溶液或和元李记 0.25%胰蛋白酶消化液 (含 EDTA, 含酚红) (货号: AC15L811), 消化 1-3min
传代比例	1: 2-1: 4
换液频率	2-3 次/周

冻存方法

冻存液	55%培养基, 40%FBS, 5% (v/v) DMSO 或和元李记无血清细胞冻存液 (增强型) (货号: AC05L053)
冻存密度	1-3 ×10 ⁶ /管, 液氮保存

具体操作方法见**细胞使用说明书**

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 当收到细胞后, 请仔细阅读细胞使用说明书, 按规定操作并记录细胞状态 (拍照)。我司为客户提供一周内的售后保障, 特定情况下可免费重发细胞, 如遇技术问题请及时联系 **021-50778506** 转技术支持, 并提供图片到 life-ilab@obiosh.com。