




T84

产品描述

T84 (中文名称: 人结肠腺癌肺转移细胞), 是从一位 72 岁男性结肠癌患者的肺转移灶建立的可移植人类癌细胞株。肿瘤组织皮下接种于 BALB/c 裸鼠, 并连续进行移植。在裸鼠身上的移植过程中, 细胞株始终保持结肠癌的原始组织性状。在无胸腺小鼠中传代 23 代后建立了 T84 细胞株。这些细胞单层生长到饱和并在接触细胞间展现出紧密连接和桥粒。有很多关于多肽类激素和神经递质并维持定向电解质传输的受体。角蛋白免疫过氧化物酶染色阳性。

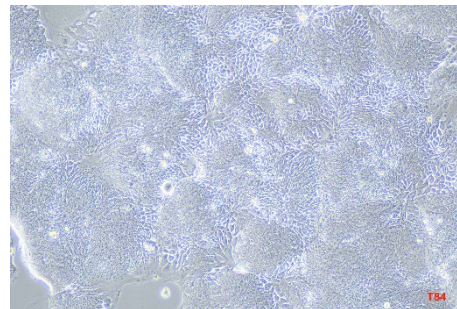

细胞形态图 100×

正常的细胞形态为上皮样多角, 贴壁生长。种属: 人; 组织来源: 转移性肺组织。

订购信息

产品名称	货号	规格
T84	AX03L241	T25/1 mL

运输方式

常温/干冰运输。

使用方法

培养方法

培养基	DMEM/F-12 (GIBCO: 11320033 或和元李记: AC01L034) + Fetal Bovine Serum(GIBCO: 10099141)或和元李记特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055) 10% + P/S (货号: AC03L332) 1%
培养条件	37°C 5% CO ₂
消化条件	0.25% (w/v) Trypsin-0.53 mM EDTA 溶液或和元李记 0.25%胰蛋白酶消化液 (含 EDTA, 含酚红) (货号: AC15L811), 消化 1-3min
传代比例	1: 2-1: 4
换液频率	2-3 次/周

冻存方法

冻存液	55%培养基, 40%FBS, 5% (v/v) DMSO 或和元李记无血清细胞冻存液 (增强型) (货号: AC05L053)
冻存密度	1-3 ×10 ⁶ /管, 液氮保存

具体操作方法见[细胞使用说明书](#)

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 当收到细胞后, 请仔细阅读细胞使用说明书, 按规定操作并记录细胞状态 (拍照)。我司为客户提供一周内的售后保障, 特定情况下可免费重发细胞, 如遇技术问题请及时联系 **021-50778506** 转技术支持, 并提供



图片到 life-ilab@obiosh.com。