




## SW 1353

### 产品描述

SW 1353 (中文名称: 人软骨肉瘤细胞), 来源于骨; 软骨肉瘤, 正常的细胞形态为成纤维细胞样, 贴壁生长。

### 订购信息

产品名称	货号	规格
SW 1353	AX03L351	T25/1 mL

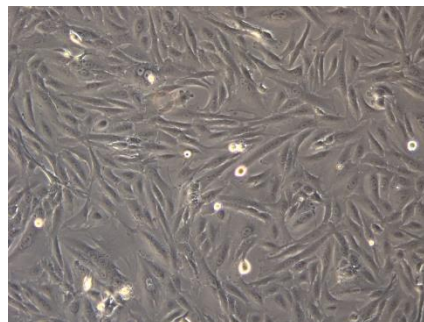

细胞形态图 200×

### 运输方式

常温/干冰运输。

### 使用方法

#### 培养方法

培养基	L-15 培养基(GIBCO:41300039)90%, Fetal Bovine Serum (高品质胎牛血清) 或和元李记特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055) 10%
培养条件	37°C 100% 空气 (必须用培养瓶拧紧培养)
消化条件	0.25% Trypsin- EDTA(GIBCO: 25200-056), 放于室温(或在 37°C),直到细胞分离
传代比例	1: 2
换液时间	每周换液 2-3 次

#### 冻存方法

冻存液	85%培养基, 10%FBS, 5% (v/v) DMSO 或 和元李记快速细胞冻存液 (无血清、无蛋白) (货号: AC05L033)
冻存密度	1-3 ×10 <sup>6</sup> /管, 液氮保存

具体操作方法见**细胞使用说明书**

### 注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 当收到细胞后, 请仔细阅读细胞使用说明书, 按规定操作并记录细胞状态 (拍照)。我司为客户提供一周内的售后保障, 特定情况下可免费重发细胞, 如遇技术问题请及时联系 **021-50778506** 转技术支持, 并提供图片到 [life-ilab@obiosh.com](mailto:life-ilab@obiosh.com)。
- 可按需定制, 如对所买细胞株有进一步改造 (基因沉默、基因敲除/敲入、基因过表达等) 需求, 请联系和元生物技术服务电话 **021-58585887-8056, 15800353038**。

### 相关产品推荐

特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055)  
RPMI-1640 medium (含 L-谷氨酰胺) (货号: AC01L064)