




THP-1

产品描述

THP-1 (中文名称: 人单核细胞白血病细胞), 该细胞对乳汁珠和激活的红细胞有吞噬作用, 无表面和胞质免疫球蛋白。THP-1 可以用佛波醇、TPA 诱导单核细胞分化。

正常的细胞形态为单核细胞, 悬浮生长。种属: 人; 细胞来源: 急性单核细胞白血病, 单核细胞; 细胞类型: 肿瘤细胞; 肿瘤类型: 白血病细胞。

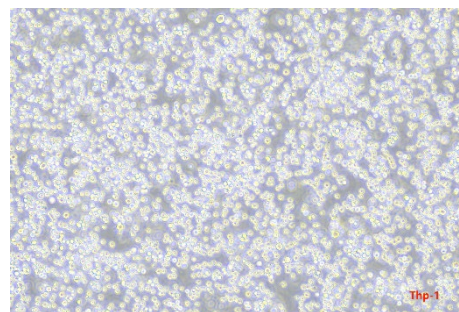

细胞形态图 100×

订购信息

产品名称	货号	规格
THP-1	AX06L211	T25/1 mL

运输方式

常温/干冰运输。

使用方法

培养方法

培养基	RPMI-1640 (GIBCO: 11875093 或和元李记: AC01L064) + 0.05mM β -mercaptoethanol + Fetal Bovine Serum(GIBCO:10099141)或和元李记特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055) 10% + P/S (货号: AC03L332) 1%
培养条件	37°C 5% CO ₂
消化条件	/
传代比例	1: 2-1: 5
换液频率	2-3 次/周

冻存方法

冻存液	55%培养基, 40%FBS, 5% (v/v) DMSO 或和元李记无血清细胞冻存液 (增强型) (货号: AC05L053)
冻存密度	1-3 $\times 10^6$ /管, 液氮保存

具体操作方法见 [细胞使用说明书](#)

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 当收到细胞后, 请仔细阅读细胞使用说明书, 按规定操作并记录细胞状态 (拍照)。我司为客户提供一周内的售后保障, 特定情况下可免费重发细胞, 如遇技术问题请及时联系 **021-50778506** 转技术支持, 并提供图片到 life-ilab@obiosh.com。
- 可按需定制, 如对所买细胞株有进一步改造 (基因沉默、基因敲除/敲入、基因过表达等) 需求, 请联系和元生物技术服务电话 **021-58585887-8056, 15800353038**。