




YAC-1

产品描述

YAC-1 (中文名称: 小鼠淋巴瘤细胞), 该细胞是一个淋巴瘤细胞, 将 Moloney 白血病病毒 (MLV) 接种到新生 A/Sn 小鼠中生成。YAC-1 细胞对 NK 细胞的活动敏感, 对于 NK 细胞活性检测十分有用。

正常的细胞形态为淋巴母细胞样, 悬浮生长。种属: 小鼠; 细胞来源: Moloney 鼠科白血病病毒(Mo-MuLV)感染, 淋巴瘤; 细胞类型: 肿瘤细胞; 肿瘤类型: 淋巴瘤细胞。

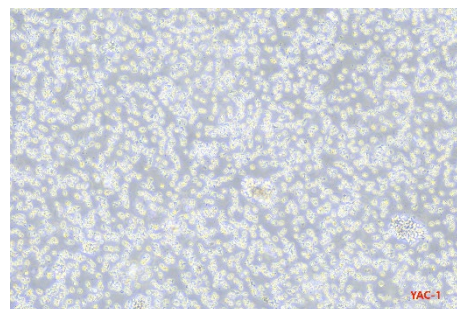

细胞形态图 100×

订购信息

产品名称	货号	规格
YAC-1	AX31L144	T25/1 mL

运输方式

常温/干冰运输。

使用方法

培养方法

培养基	RPMI-1640 (GIBCO: 11875093 或和元李记: AC01L064) + Fetal Bovine Serum(GIBCO: 10099141)或和元李记特级胎牛血清 (Foetal Bovine Serum) (货号: AC03L055) 10% + P/S (货号: AC03L332) 1%
培养条件	37°C 5% CO ₂
消化条件	/
传代比例	3×10^5 - 5×10^5 cells/mL
换液频率	2-3 次/周

冻存方法

冻存液	55%培养基, 40%FBS, 5% (v/v) DMSO 或和元李记无血清细胞冻存液 (增强型) (货号: AC05L053)
冻存密度	$1-3 \times 10^6$ /管, 液氮保存

具体操作方法见**细胞使用说明书**

注意事项

- 本产品仅限于科学实验研究使用, 不得用于临床诊断、治疗等领域。
- 当收到细胞后, 请仔细阅读细胞使用说明书, 按规定操作并记录细胞状态 (拍照)。我司为客户提供一周内的售后保障, 特定情况下可免费重发细胞, 如遇技术问题请及时联系 **021-50778506** 转技术支持, 并提供图片到 life-ilab@obiosh.com。
- 可按需定制, 如对所买细胞株有进一步改造 (基因沉默、基因敲除/敲入、基因过表达等) 需求, 请联系和元生物技术服务电话 **021-58585887-8056, 15800353038**。